


Технические параметры продукта

Технические параметры

Название. Интеллектуальное массажное кресло
Номер модели : L28
Напряжение. 220V~
Частота: 50 Гц
Мощность: 120W
Размер: 160*77*118 см
Стандарт реализации. GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Категория безопасности. Класс I

Компания оставляет за собой право совершенствовать продукт и руководство, если какие-либо изменения без уведомления, внешний вид продукта в натуральном виде будет преобладать; Этот буклет был тщательно проверен, но не исключает, что могут быть печатные ошибки или пропуски или недоразумения в содержании, пожалуйста, поймите, компания оставляет за собой право объяснить.

массажное кресло

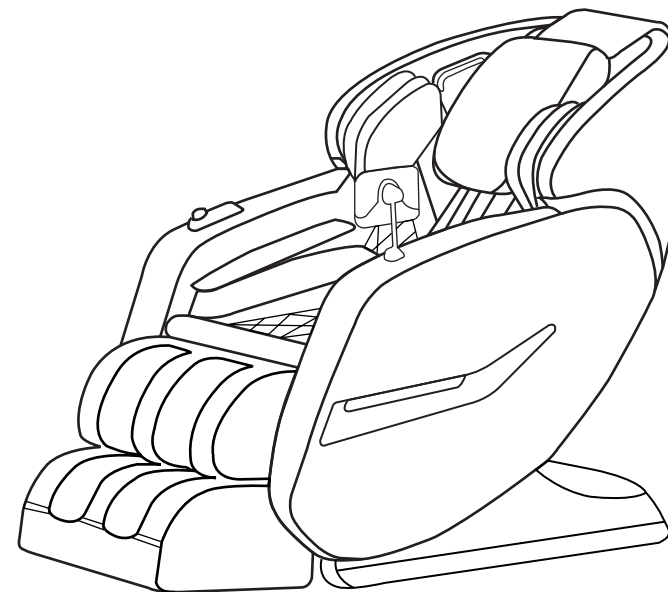

руководство пользователя

Благодарим вас за покупку наших массажеров.

Это массажное кресло имеет эргономичный дизайн, для достижения шеи, спины, талии, бедер, ног, рук и других частей массажа, различные методы массажа, теплое тепло, левый и правый качели, подушки экструзии массаж и другие функции, является роскошью наслаждения высокого класса массажных кресел.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и обратите особое внимание на меры предосторожности, чтобы обеспечить правильную работу и использование этого продукта. Пожалуйста, храните руководство в безопасном месте для дальнейшего использования.


Содержание

Вопросы безопасности и технического обслуживания	1-2
Предупреждения по безопасности использования.....	3
Название детали	4
Функция изделия	5
Введение в ручное управление	6
Основные функции ручного управления	7
Метод использования	8-9
Технические параметры продукта	10

Метод использования

III. Методы перемещения

- Убедитесь, что после того, как все провода оторваны от поверхности массажного кресла, спинка нажимается вниз под определенным углом (когда центр тяжести падает на шкив), то есть вы можете держать массажный стул за руку, чтобы двигаться вперед, после перемещения в нужное место массажный стул легко удерживается под нормальным углом. (Примечание: При движении обязательно выключите выключатель питания, а затем отключите провод питания).

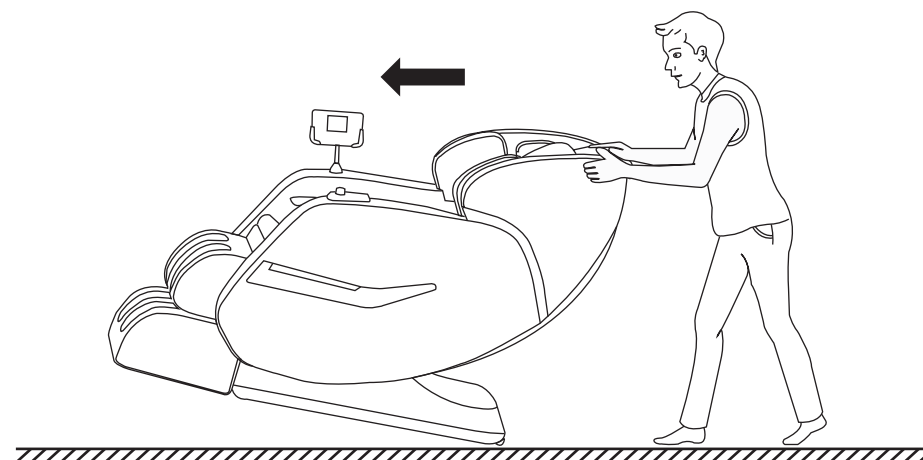

⚠ предупреждение

Передвижной ролик за массажным креслом подходит только для медленного движения на короткие расстояния, например, для обработки на большие расстояния, используйте другие вспомогательные мобильные инструменты, чтобы переместить этот массажный стул!

Метод использования


I. Инструкции по воспроизведению звука Bluetooth

- 1) Включить Bluetooth по умолчанию и голосовые подсказки;
- 2) Включите функцию Bluetooth мобильного телефона, найдите локальное соединение Bluetooth успешно, включите музыку и начните играть.


- 3) Если необходимо заполнить пароль: 8888

II. Снятие подлокотника



Когда дверь слишком мала, чтобы стул мог быть перенесен в дверь, можно снять поручни и нести их отдельно.

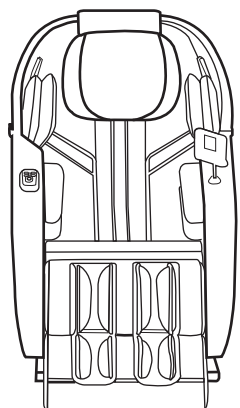

- 1, открутите две стороны шестигранных винтов
- 2, Вытащите рожевой разъем

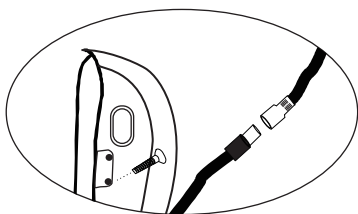

1. стыковка трахеи на рисунке 2 по цвету;
- 2, затем соедините два канавки на рисунках 1 и 3, чтобы загрузить, два канавки должны быть загружены, чтобы управлять газом гладко, осторожный изгиб; Закройте винт на рисунке 3;

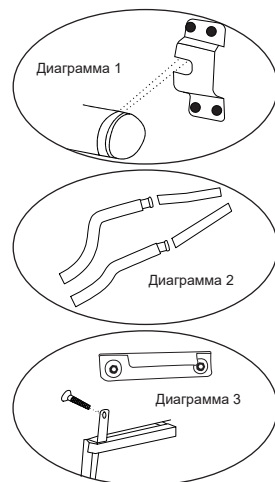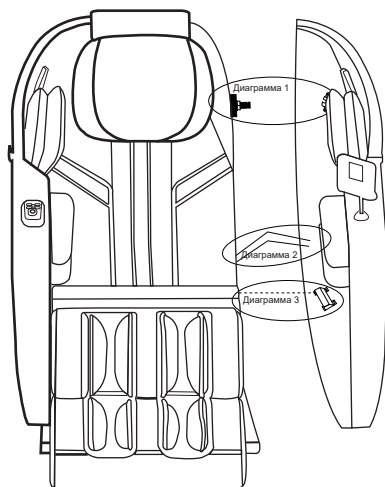

Вопросы безопасности и технического обслуживания

1 Важное предупреждение безопасности

- Не приближайте ребенка к подвижной части устройства;
- Используйте хороший источник питания заземления, соответствующий этому устройству;
- После использования или перед очисткой отключите розетку питания, чтобы избежать повреждения оборудования или тела;
- Пожалуйста, используйте это устройство в соответствии с инструкциями настоящего Руководства;
- Не следует использовать рекомендуемые аксессуары и принадлежности;
- Не используйте это устройство на открытом воздухе;
- Внимательно ознакомьтесь с этим руководством по эксплуатации, прежде чем приступить к его использованию.
- Запрещается использовать это устройство для других целей, не перечисленных в данном руководстве;
- Рекомендуется использовать 20 минут;
- При повреждении или повреждении крышки нельзя использовать этот прибор;
- Не используйте это устройство в случае повреждения корпуса или куртки;
- Не используйте какие - либо предметы, чтобы закрыть отверстие для отвода тепла устройства;
- Не допускать попадания каких - либо предметов в это устройство;
- При использовании этого устройства нельзя спать;
- Не используйте это устройство, когда вы пьяны или чувствуете себя плохо;
- Не используйте это устройство в течение часа после еды.
- Не прикладывайте слишком много усилий при использовании этого устройства, чтобы избежать травм;
- Запрещается ношение хрупких, взрывоопасных и легковоспламеняющихся предметов, таких как мобильные телефоны, зажигалки, в массажных и угнетенных зонах.

2 Использование окружающей среды

- Не используйте это устройство в очень влажной среде;
- Не используйте устройство сразу при резком изменении температуры окружающей среды;
- Не используйте этот прибор в пыльной или коррозионной газовой среде;
- Не используйте этот прибор в небольшом пространстве или в местах с плохой циркуляцией воздуха;
- Нормальная комнатная температура от 0°C до 35°C;
- При относительной влажности от 20% до 80% не используйте этот прибор в помещениях с чрезмерной влажностью (например, в ванной комнате);
- Не используйте это устройство на открытом воздухе;
- Избегать прямых солнечных лучей;
- Этот прибор не должен приближаться к источнику тепла (например, к краю печи, вентиляционному отверстию кондиционера);
- Не используйте этот прибор в грозовую погоду;
- Не используйте этот прибор в пыльных ситуациях.

3 Не стоит использовать массажные кресла

- Лица с остеопорозом;
- Лица с сердечными проблемами и с электронными медицинскими устройствами, такими как кардиостимуляторы;
- Лица с высокой температурой;
- беременных женщин или женщин в период менструации;
- Лица с физическими травмами или заболеваниями поверхности тела;
- Запрет на использование этого продукта для детей младше 14 лет и психически неуравновешенных лиц в отсутствие контроля;
- лица, нуждающиеся в отдыхе или испытывающие физические недостатки по указанию врача;

Вопросы безопасности и технического обслуживания

- Запрещается использовать этот прибор при влажности тела;
 - Устройство имеет тепловую поверхность и должно быть осторожным при использовании людьми, которые не чувствительны к теплу.
4. Вопросы безопасности
- Проверьте, соответствует ли напряжение спецификациям устройства;
 - Не используйте мокрые руки для подключения разъема питания;
 - Не допускать попадания воды в прибор, избегая поражения электрическим током или повреждения прибора;
 - При подключении розетки питания не тяните кабель питания, не должны быть слишком грубыми;
 - Не повреждать провода или не изменять схему устройства;
 - Не используйте влажную ткань для очистки электрических выключателей, вилок и других заряженных частей устройства;
 - В случае отключения электроэнергии следует оставить устройство, чтобы избежать повреждения при внезапном восстановлении электричества;
 - Если вы чувствуете, что устройство является ненормальным во время использования, немедленно прекратите его использование и проконсультируйтесь с местным поставщиком;
 - Если вы чувствуете физические аномалии во время использования этого устройства, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу;
 - Данное устройство не предназначено для использования лицами с физическими недостатками, сенсорными или неврологическими недостатками или отсутствием опыта и здравого смысла (включая детей), если только они не находятся под наблюдением и руководством лиц, ответственных за их безопасность, относительно того, как использовать это устройство. Дети должны находиться под наблюдением, чтобы убедиться, что они не используют инструменты для игры;
 - Если гибкий провод питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить специалистом изготовителя, его отдела технического обслуживания или аналогичного подразделения.
5. Техническое обслуживание и обслуживание продукции
- Данное устройство может быть отремонтировано только сервисным центром, указанным изготовителем, и пользователь не может демонтировать или отремонтировать его самостоятельно;
 - Помните выключить общий выключатель питания после использования;
 - Не используйте этот прибор, когда розетка питания ослаблена;
- В случае длительного неиспользования провод питания устройства должен быть свернут и храниться в сухой и пылевой среде;
- Не храните этот прибор вблизи высокой температуры или открытого огня, не позволяйте солнечному свету светиться в течение длительного времени;
 - Очистите устройство тысячами тканей, не используйте разбавитель, бензол или алкоголь;
 - Машины и устройства данного прибора специально спроектированы и изготовлены без специального обслуживания;
 - Не следует использовать острые предметы для нанесения ударов по этому устройству;
 - Не прокручивать или не перетаскивать устройство на неровной земле, его необходимо поднять и переместить;
 - Используйте его с перерывами, и устройство не должно работать непрерывно в течение длительного времени.
- 6 Обработка распространенных явлений
- Звук двигателя во время работы: звук нормальной работы;
 - Контроллер не работает должным образом: проверьте надежность подключения розетки питания к розетке питания; Проверьте, включен ли выключатель питания;
 - Остановка работы устройства: от номинального времени устройство автоматически активирует клавишу закрытия; Устройство работает слишком долго в непрерывном режиме, и переключатель терморегулирующей защиты автоматически выключается, позволяя устройству отдыхать в течение получаса, прежде чем использовать его.
7. Условия хранения
- комнатная температура на складе - 5°C ~ 35°C;
 - Относительная влажность от 20% до 80%, отсутствие коррозионных газов и хорошо проветриваемое помещение.

Основные функции ручного управления

Ботиночный массаж

- В режиме ожидания: нажмите кнопку «» для включения/выключения всех функций массажа, вы можете нажать поворотную кнопку «» для включения/выключения массажного кресла.
- Во включенном состоянии, нажмите эту кнопку массажное кресло сначала лежать на начальный угол, после завершения по умолчанию запустить первую автоматическую программу, по умолчанию время работы составляет 20 минут, а затем нажмите эту кнопку, чтобы закрыть все функции массажного кресла.


автоматический режим

- Кнопка автоматической программы массажа: в зависимости от состояния вашего тела и времени массажа вы можете выбрать любую из 23 видов массажных программ для целенаправленного массажа. (Подробнее см. на ЖК-дисплее)


Другие функции

- Место подушки безопасности: Нажмите клавишу « Местное расположение подушки», чтобы зафиксировать место массажа подушки безопасности руки, плечи, ноги и так далее;
- Место массажа: Нажмите клавишу « место массажа», чтобы регулировать место массажа манипулятора, например, шея, плечи, спина, поясница, бедра, бедра и другие интервальные части массажа;
- Сила воздушной подушки: нажатие клавиши « Сила воздушной подушки + / - » может регулировать массаж воздушной подушки 0 - 3 передачи, последовательно регулируя цикл;
- Сила ролика: нажатие клавиши « Сила ролика + / - » может регулировать силу ролика 0 - 3 передачи, последовательно регулируя цикл;
- Массажная интенсивность: нажатие клавиши « Массажная интенсивность + / - » может регулировать скорость массажа манипулятора 0 - 3 передачи, последовательно регулируя цикл;
- Горячий компресс: Нажмите клавишу « Горячий компресс», чтобы открыть / выключить функцию горячего компресса талии;
- Нулевая гравитация: нажмите клавишу « нулевая гравитация», чтобы включить / выключить функцию нулевой гравитации;
- Замок времени / ребенка: длительное нажатие клавиши « Замок времени / ребенка» может включать или выключать функцию блокировки ребенка; Краткое нажатие клавиши « Время / Детский замок» позволяет выбрать 10 - минутный / 20 - минутный / 30 - минутный массаж;
- Регулирование спинки: Нажмите клавишу « регулировка спинки  », чтобы поднять спинку вверх, Нажмите клавишу « регулировка спинки  », чтобы уменьшить спинку;
- Способ массажа: Нажмите клавишу « массажная ручная», чтобы выбрать 6 методов массажа: втирание, хлопок, втирание, массаж, стук, палец;
- Регулирование механизма: можно долго нажимать клавишу « регулировка механизма  », чтобы регулировать массаж верхней части манипулятора, и долго нажимать клавишу « регулировка механизма  », чтобы регулировать массаж нижней части манипулятора.
- Голос: Нажмите клавишу « Голос» для включения / выключения функции голосового управления;
- Bluetooth: Нажмите клавишу «Bluetooth», чтобы включить / выключить функцию Bluetooth;
- Ширина массажа: нажмите клавишу « Ширина массажа», чтобы регулировать ширину / среднюю / узкую функцию манипулятора;

Введение в ручное управление

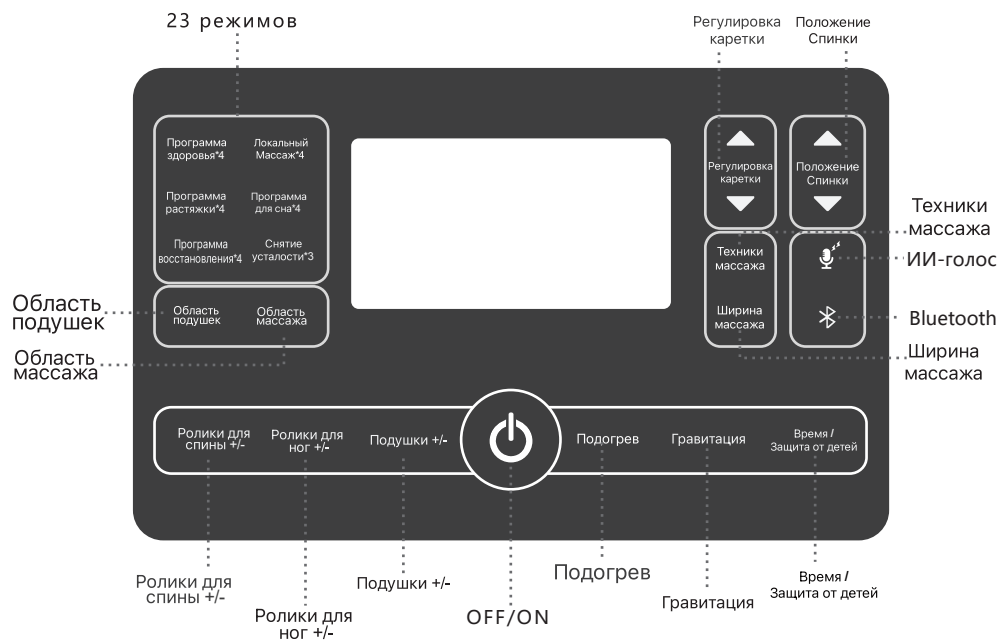

кнопка быстрого доступа

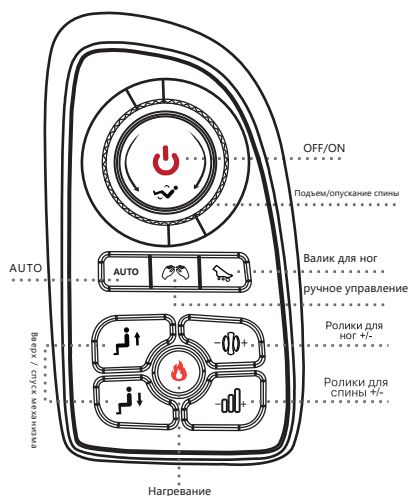


- Включите ключ: нажмите «»клавишу, чтобы включить / выключить функцию массажа всей машины.
- Регулирование спины: вращение«»регулирует функцию подъема спинки.
- Автоматическая процедура массажа Клавиша AUTO: В зависимости от вашего физического состояния и времени массажа можно выбрать любой из 23 режимов для целевого массажа.
- Ручной: Нажмите клавишу «», чтобы выбрать метод ручного массажа, вы можете выбрать 6 методов массажа.
- Нагрев: Нажмите«» клавишу, чтобы открыть / выключить функцию нагрева талии;
- Ролик стопы: Нажмите клавишу «» для открытия / закрытия ролика стопы;
- Сила подушки безопасности: нажатие клавиши «» может регулировать массаж подушки безопасности в три передачи;
- Регулирование интенсивности массажа: нажмите«»на скорость массажа 3 передачи плюс - минус регулировка силы;
- Поднимание / падение механизма: можно долго нажимать клавишу «», чтобы регулировать массаж верхней части манипулятора, долгое нажатие клавиши «», чтобы регулировать массаж нижней части манипулятора.

Использование предупреждений безопасности


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда рама чаши массажного кресла поднимается, люди не должны оказывать силу тяжести на раму чаши, чтобы предотвратить падение массажного кресла вперед во избежание повреждения изделия или травм.

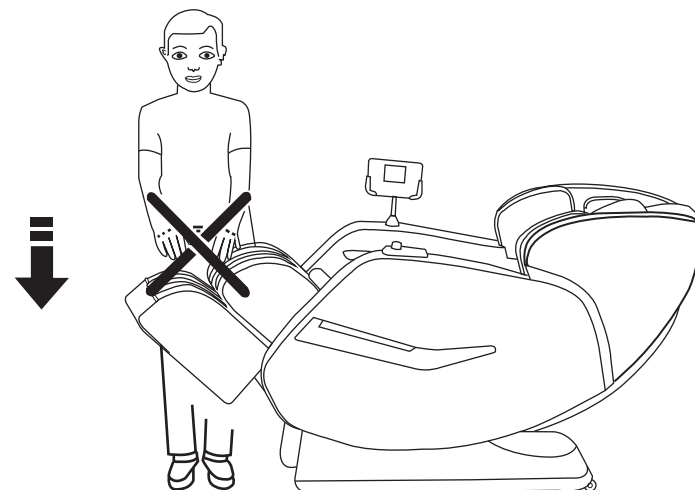


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждения изделия или получения травм в процессе массажа перед использованием массажного кресла уберите в карман пальто твердые предметы или портативные украшения (например, ключи, часы и другие портативные твердые предметы).

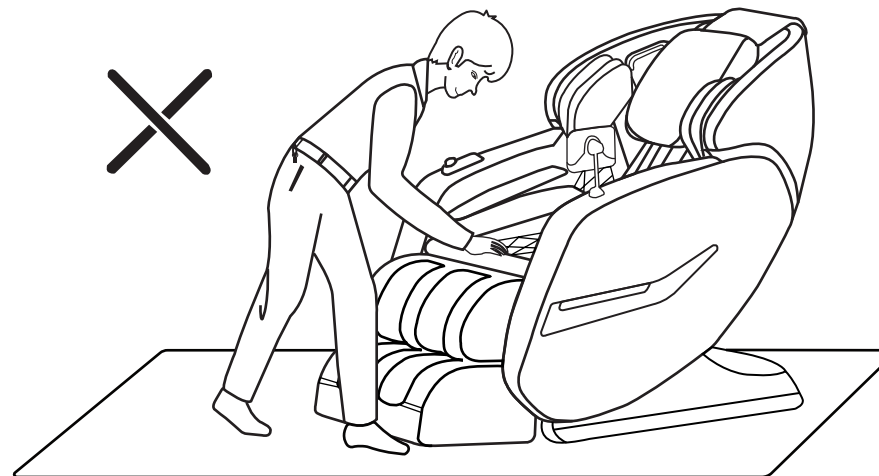

Название компонента

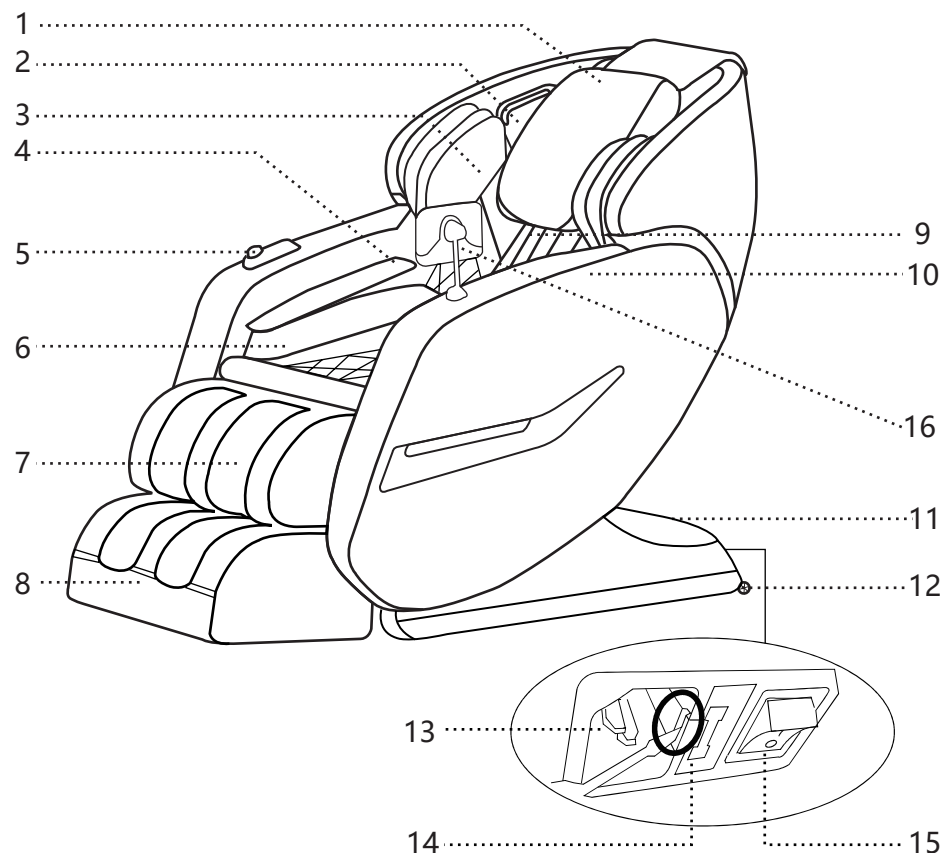

- 1, головная подушка 2, 3D аудио 3, пневматическая сборка плеча
4, пневматическая сборка руки 5, комбинация кнопок 6, подушка
7, пневматическая сборка тельца 8, нижний ролик 9, подушка спинки
10, подлокотник 11, задняя крышка коробки питания 12, подвижной ролик
13, разъем кабеля питания 14, предохранитель 15, выключатель питания
16, контроллер большого экрана

Функция продукта

- Этот продукт спроектирован с помощью набора 3D - манипуляторов, которые могут ходить вверх и вниз, а также беззвучно проектировать.
- Конструкция с функциями автоматического обнаружения и микрорегулировки положения плеча; Кривая человеческого тела и точка массажа пальца автоматически обнаруживают функцию, в соответствии с обнаруженной кривой человеческого тела и точкой массажа пальца автоматически регулирует растяжение руки до и после, чтобы сделать массаж более человеческим
- Имеется выбор диапазона ручного массажа манипулятором: включает в себя пять вариантов диапазона массажа: фиксированную точку, верхнюю и нижнюю части спины, местную, полную и т.д.
- Имеет функцию ручного массажа: включает в себя шесть методов массажа, таких как втирание, хлопанье, массаж, давление пальцев, стук, втирание и другие.
- Имеет функцию регулировки массажа: включает в себя регулировку интенсивности массажа 6 передач, регулировку интенсивности давления 3 передач и другие функции регулировки массажа.
- Имеет функцию массажа давления верхней части тела: функция массажа давления ладони, функция массажа давления на плече, функция массажа давления на руке, трехступенчатая регулировка интенсивности давления воздуха.
- Имеет функцию массажа давления в нижней части тела: функцию массажа давления воздуха в голени, функцию массажа давления воздуха в ногах, трехступенчатую регулировку интенсивности давления воздуха.
- Направляющая спинки использует технологию кривой направляющей, которая полностью соответствует кривой спины человека, от головы до бедра может наслаждаться личным массажем.
- Функция нагрева спины: использование источников тепла из углеродного волокна дальнего инфракрасного диапазона.
- Система воспроизведения музыки со встроенным 3D - звуком в левом и правом подлокотниках. Можно использовать функцию Bluetooth для интеллектуальных устройств для беспроводного подключения к воспроизведению музыки.
- Имеет функцию регулировки подъема и падения сцепления спинки, функцию автоматического регулирования угла лежа при нулевой гравитации.
- Имеет функцию массажа колес на подошвах ног, скорость может быть отрегулирована в три передачи.
- Ноги оснащены функцией регулировки желтого растяжения пули, длина вытянутой ноги зависит от длины ноги пользователя, сокращение стопы уменьшается пружинной силой.
- Функция автоматического подъема и посадки выключателя, функция автоматического сброса манипулятора.
- Настройка больших экранных ручных контроллеров и быстрых кнопок для более удобной работы.